


快速指南：使用 Cyclo G6® 激光器（带扫描管理软件） 和 MicroPulse P3® 传输设备*



将钥匙转到“ON”（打开）。等待初始化完成。连接 MicroPulse P3 探头。

4 设置治疗参数
通过使用“Preset Menu”（预设菜单）或通过手动输入来设置参数。

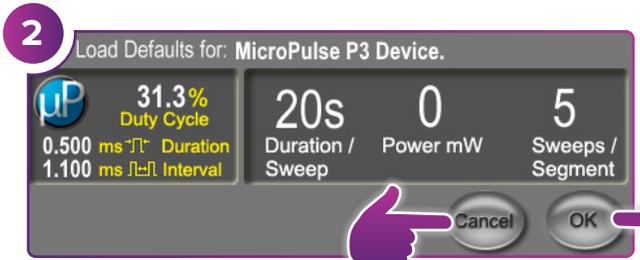

选择“OK”（确定）以设置新参数。将出现一个弹出屏幕（步骤 3）。

选择“CANCEL”（取消）以保留前一个治疗中使用的参数。将出现一个弹出屏幕（步骤 3）。




在背页查看更多步骤




按“OK”（确定）。要设置新参数，请转到步骤 4。
要保留您的参数，请转到步骤 5。




* 在提供治疗前，请参阅“用户指南：MicroPulse TLT 的 Cyclo G6 软件升级”、“Cyclo G6 激光器系统操作手册”和“MicroPulse P3 传输设备使用说明”，以了解传输说明，包括安全、警告和注意事项。

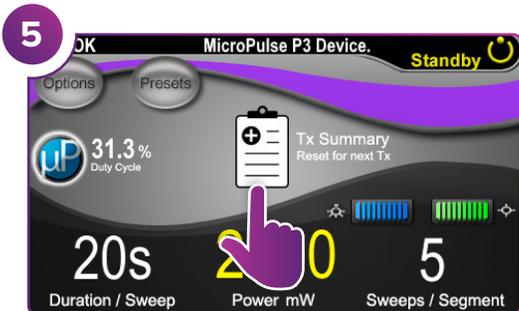


选择“Tx Summary”（治疗摘要）。

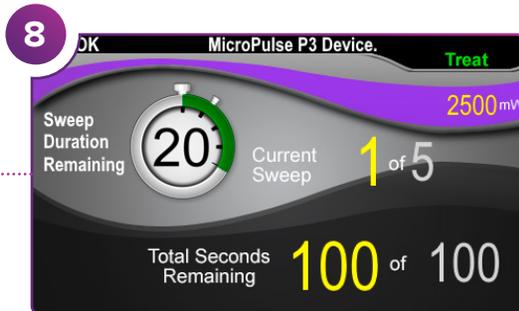


向所需段提供治疗。

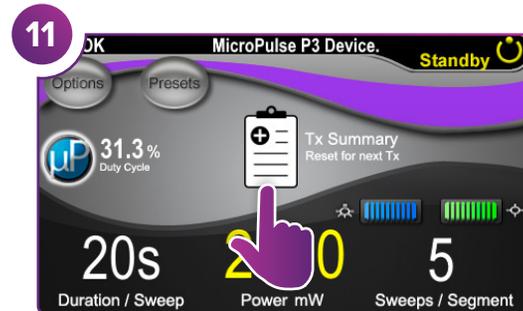


按此按钮以查看治疗摘要。

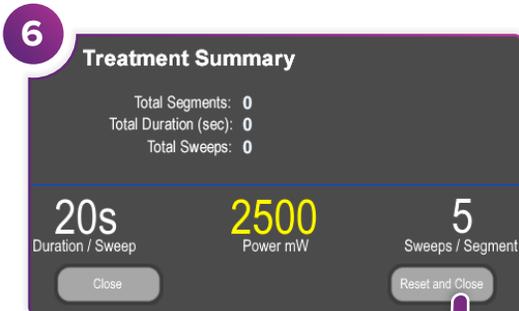

确认“Total Segments”（总段数）、“Total Duration”（总持续时间）和“Total Sweeps”（总扫描数）值已重置为零。

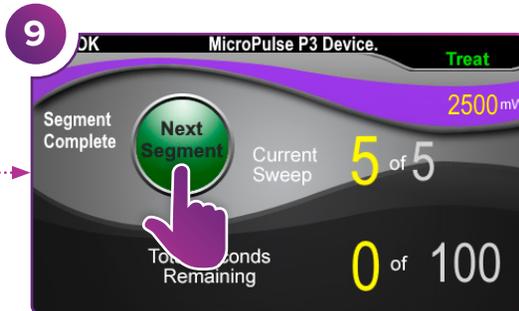

按此按钮以重置值。要治疗下一段，请重复步骤 8。治疗完成后，继续执行步骤 10。

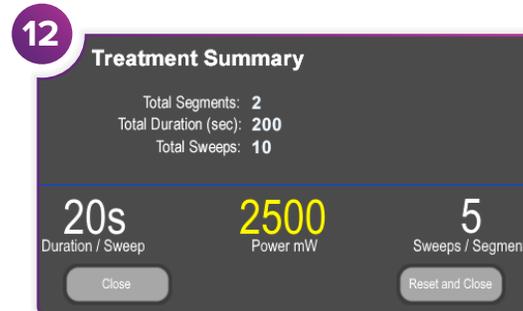


查看治疗摘要。




按此按钮以进入“Treat”（治疗）模式（启用激光器）。



治疗完成后，按此按钮以进入“Standby”（待机）模式（禁用激光器）。

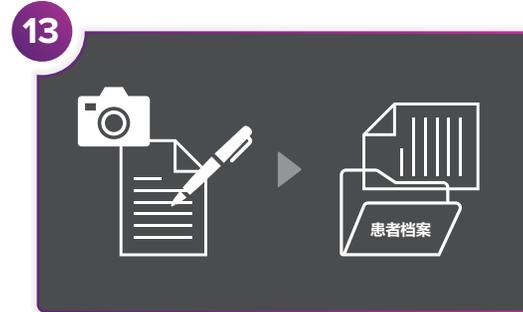

记录治疗信息。

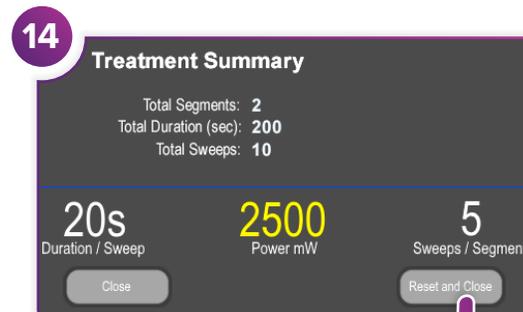

为下一次治疗进行重置。



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. 保留一切权利。Iridex、Iridex 徽标、MicroPulse、MicroPulse P3 和 Cyclo G6 是 Iridex 的注册商标。
88305-ZH.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
荷兰

