


# Guida rapida: Utilizzo del laser Cyclo G6® con il software di gestione delle scansioni e il dispositivo di erogazione MicroPulse P3®\*




1  
Ruotare la chiave su "ON" (ACCESO).  
Attendere il completamento dell'inizializzazione.  
Collegare la sonda MicroPulse P3.

4  
**Impostazione dei parametri di trattamento**  
Impostare i parametri usando Preset Menu (Menu impostazioni predefinite) o inserendoli manualmente.

Opzione per le impostazioni predefinite

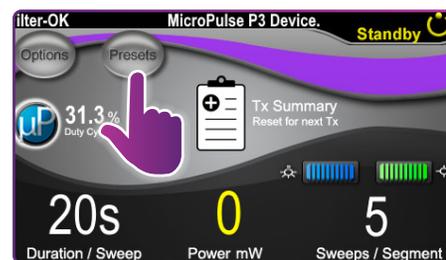

Opzione manuale

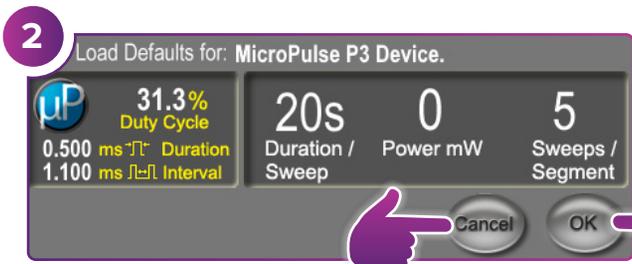

2  
Selezionare "OK" per impostare nuovi parametri.  
Verrà visualizzata una schermata pop-up (Passaggio 3).

Selezionare "CANCEL" (ANNULLA) per mantenere i parametri utilizzati nel trattamento precedente. Verrà visualizzata una schermata pop-up (Passaggio 3).




VEDI ALTRI PASSAGGI SUL RETRO DELLA PAGINA




3  
Premere "OK".  
Per impostare nuovi parametri, andare al Passaggio 4.  
Per mantenere gli stessi parametri, andare al Passaggio 5.



\* Prima di erogare il trattamento, fare riferimento alla "Guida per l'utente: Aggiornamento del software Cyclo G6 per MicroPulse TLT", al "Manuale operativo del sistema laser Cyclo G6" e alle "Istruzioni per l'uso del dispositivo di erogazione MicroPulse P3" per le istruzioni di erogazione, comprese sicurezza, avvertenze e precauzioni.

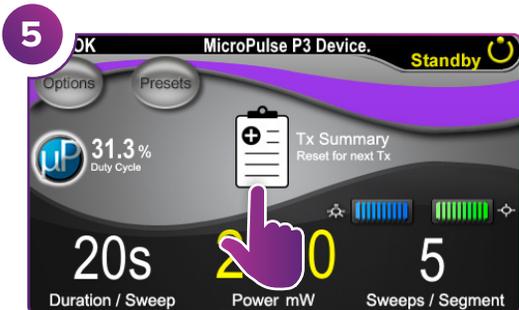


Selezionare "Tx Summary" (Riepilogo Tx).

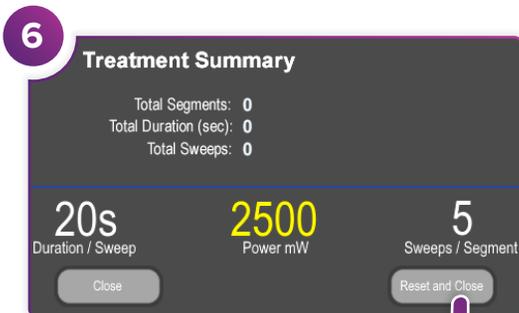


Confermare che i valori di "Total Segments" (Segmenti totali), "Total Duration" (Durata totale) e "Total Sweeps" (Scansioni totali) siano azzerati.



Premere questo pulsante per attivare la modalità Treat (Trattamento) che abilita il laser.

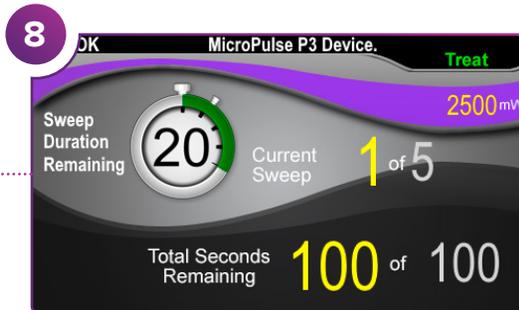


Erogare il trattamento sul segmento desiderato.

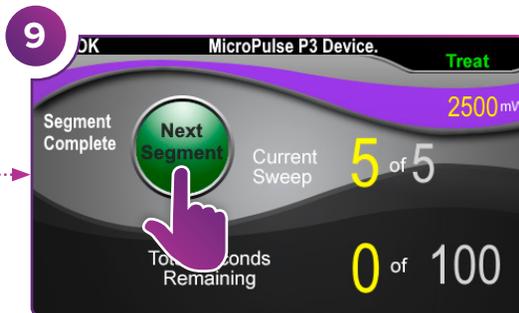


Premere per azzerare i valori. Per trattare il segmento successivo, ripetere il Passaggio 8. Quando il trattamento è completo, proseguire al Passaggio 10.



Al termine del trattamento, premere questo pulsante per attivare la modalità Standby (Attesa) che disabilita il laser.

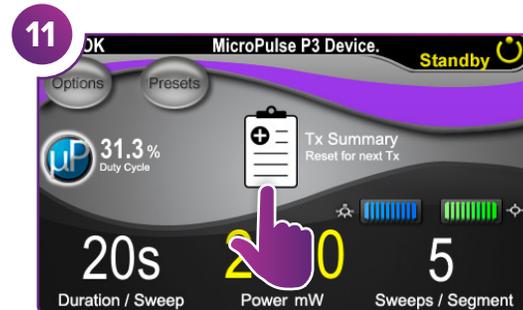


Premere per visualizzare il riepilogo del trattamento.

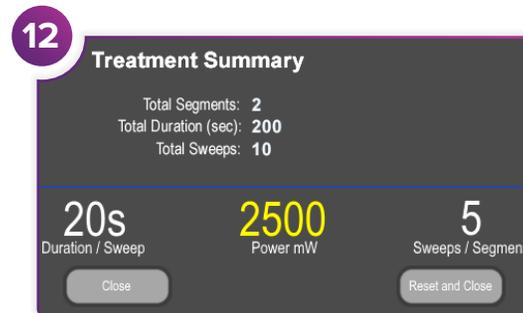

Visualizzare nuovamente il riepilogo del trattamento.



Registrare le informazioni sul trattamento.

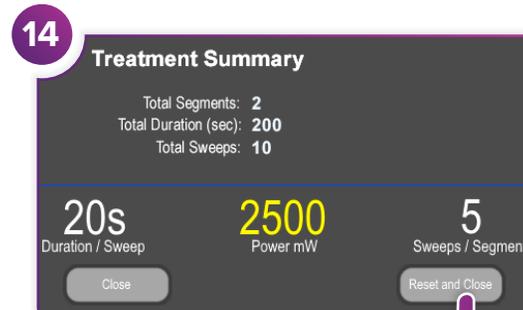

Azzerare per il trattamento successivo.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com  
 © 2022 Iridex. Tutti i diritti riservati. Iridex, il logo Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 e Cyclo G6 sono marchi registrati di Iridex.  
 88305-IT.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 Paesi Bassi

